

COUSSINS GEL ET MOUSSE **GELSCAR, GELTOP, ERGOMIX**



COUSSINS COMPOSÉS DE GEL VISCOÉLASTIQUE ASSOCIÉ OU NON À UNE BASE EN MOUSSE DE HAUTE RÉILIENCE

- **Efficacité** : diminution des forces de cisaillement appliquées à la peau grâce aux propriétés du gel viscofluide.
- **Sécurité** : principe de stabilisation du coussin.



COUSSIN GELSCAR

- Diminution des forces de cisaillement appliquées à la peau par les propriétés du gel viscofluide.
- Réduction des pressions maximales.
- Sécurisation de l'assise par 4 cordons cousus aux 4 coins.
- Isothermie par les propriétés de l'enveloppe en néoprène cellulaire.
- Le gel peut procurer une sensation de fraîcheur au premier contact : l'enveloppe en néoprène permet de l'atténuer.




COUSSIN GELTOP



Pour le domicile : livré avec 2 housses.
Pour la collectivité : livré avec 1 housse.



- Réduction des pressions maximales par immersion du corps dans un gel fluide supporté par une mousse de haute résilience.
- Diminution des forces de cisaillement appliquées à la peau par les propriétés du gel viscofluide.
- Thermorégulation par perméabilité de la protection à la vapeur d'eau.

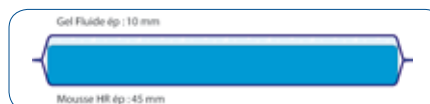

COUSSIN ERGOMIX

- Combinaison d'une mousse Zyprex et d'un gel viscofluide sous la région ischiatique.
- Réduction du «glissé avant» par une butée pelvienne ajustable.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉSIGNATION	REFERENCE	DIMENSIONS	POIDS PATIENT	NORMES FEU
GELSCAR pour une assise de fauteuil de largeur 38/42 et profondeur 39/42.	VGLS01C	40 x 40 x 3,5 cm	40 à 100 kg	EN 591-1 et 2
GELSCAR pour une assise de fauteuil de largeur 40/45 et profondeur 44/47.	VGLS01C/4345	43 x 45 x 3,5 cm		
GELTOP pour une assise de fauteuil de largeur 40/42 et profondeur 40/42, housse en Techmapolar.	VAB40	40 x 40 x 5,5 cm	30 à 95 kg	
GELTOP pour une assise de fauteuil de largeur 43/45 et profondeur 43/47, housse en Techmapolar.	VAB4345	43 x 45 x 5,5 cm		
ERGOMIX, housse en pro elastic/ antigliss.	VCPM/G	40 x 45 x 7 cm	30 à 90 kg	

Garantie 2 ans.

Entretien : Housses



ASKLÉ SANTÉ Groupe Winnicare – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 France
Tél : +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax : +33 (0)4 66 02 15 28 – E-mail : contact@askle.com

www.winnicare.fr

Dans un souci d'amélioration constante de ses produits,
ASKLÉ SANTÉ se réserve le droit d'en modifier sans préavis les caractéristiques techniques - photos non contractuelles.