

HIRTZ

Sistemi ad acqua per riscaldamento e raffreddamento pazienti



HICO-VARIO THERM 550

Cod. 540001 - Apparecchio per Ipo-Ipertermia cm 20 x 29 x 44 - regolazione temperatura 15-39°C

HICO-AQUATHERM 660

Cod. 590001 - Apparecchio per Ipotermia cm 20 x 29 x 33 - regolazione temperatura 35-39°C

HICO-HYPOTHERM 680

Cod. 530001 - Apparecchio per Ipertermia cm 20 x 29 x 44 - regolazione temperatura 15-35°C

Gli apparecchi prodotti dalla HIRTZ sono stati costruiti tenendo conto delle più attuali innovazioni nel campo dell'ipotermia ed ipertermia utilizzate per i pazienti. Grazie all'alta capacità conduttiva l'acqua è il mezzo ideale per una conduzione termica efficace, sicura e non elettrica.

I sistemi per ipo-ipertermia HICO sono composti da un'unità portatile per il controllo della temperatura dell'acqua e da un materassino o una coperta a ricircolo d'acqua. La temperatura dell'acqua viene controllata tramite un sistema di monitoraggio continuo, un meccanismo di sicurezza avverte qualora la temperatura superficiale del materassino raggiunga il limite preimpostato. L'apparecchio è dotato inoltre di una protezione contro il surriscaldamento. Una pompa assicura che l'acqua all'interno del materassino circoli continuamente ad una temperatura stabile.

Tutti gli apparecchi sono dotati di allarmi acustici e visivi che indicano che l'unità è pronta per l'utilizzo o segnalano eventuali errori di funzionamento mentre un sistema elettronico, preciso ed affidabile, garantisce l'esattezza ed il mantenimento della temperatura impostata.

L'alta versatilità ed il minimo ingombro rendono gli apparecchi HICO la soluzione ideale per il riscaldamento o il raffreddamento del paziente in sala operatoria, terapia intensiva, rianimazione ecc.

I prodotti HIRTZ sono realizzati e controllati secondo le procedure ISO 9001:2000 EN ISO 13485:2000 e IEC 601-1, sono marchiati CE in conformità alla Direttiva MDD 93/42/EEC e sono garantiti 24 mesi contro vizi e difetti di fabbricazione.

HIRTZ

Materassini, coperte ed accessori

I materassini HICO sono flessibili, soffici e durevoli, privi di lattice, non irritano la pelle e garantiscono un alto grado di sicurezza e di confort al paziente. I canali di scorrimento dell'acqua presenti nei materassini hanno un sistema antiocclusione ed assicurano una distribuzione uniforme del caldo/freddo su tutta la superficie. La connessione tra il materassino e l'apparecchio è facile, sicura e non permette distacchi accidentali. Sono inoltre disponibili delle coperte leggere e confortevoli da posizionare sopra il paziente, utilizzabili anche contemporaneamente ai materassini. Gli apparecchi ed i materassini possono essere puliti con acqua e sapone o con un comune disinfettante. I materassini HICO sono disponibili in diverse misure ed anche in versione monouso.

1 Accessori

Cod. 530002 carrello per apparecchio HICO-550/680


Cod. 590002 carrello per apparecchio HICO-660

Cod. 550022 tubo di connessione standard cm 300

Cod. 550069 tubo di connessione per SOFT TEMP

Cod. 550021 kit di riparazione

Gli apparecchi HICO si collegano ai materassini tramite un tubo lungo 3 m e possono essere forniti con carrello a 5 razze, con ruote piroettanti, munito di fermo.

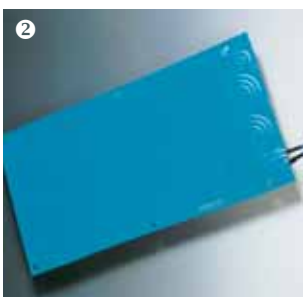

2 Materassini HICO-MAT

Cod. 550030 cm 170 x 60 x 1


Cod. 550031 cm 95 x 60 x 1

Cod. 550032 cm 150 x 45 x 1

Cod. 550035 cm 95 x 45 x 1

Cod. 550033 cm 35 x 45 x 1

I materassini Hicomat, realizzati in varie dimensioni, sono leggeri sicuri e permettono la trasmissione di caldo/freddo attraverso i canali di scorrimento dell'acqua (antiocclusione).

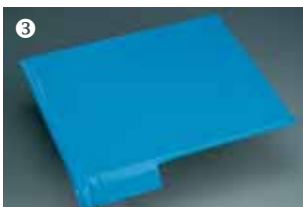

3 Coperte HICO-BLANKET

Cod. 550080 cm 50 x 30 x 0,5

Cod. 550037 cm 56 x 70 x 0,5

Cod. 550038 cm 120 x 70 x 0,5

Realizzate per essere posizionate sopra il paziente, sono estremamente leggere, flessibili e soffici, non irritano la pelle e sono facili da pulire.



4 Materassini HICO-AQUASOFT

Cod. 550070 cm 100 x 50 x 4

Cod. 550071 cm 150 x 50 x 4

Cod. 550072 cm 185 x 83 x 4

I materassini Aquasoft sono realizzati con uno spessore di 4 cm per permettere il massimo contatto tra la pelle e la superficie del materassino termico. Garantiscono un'ottima trasmissione della temperatura, un alto grado di confort per il paziente e svolgono contemporaneamente un'azione anti-decubito.




5 Monouso HICO-SOFT TEMP

Cod. 550060 cm 160 x 49

Cod. 550061 cm 81 x 49

Copertine/materassini monouso leggeri ed ipoallergici da utilizzare sopra o sotto il paziente.

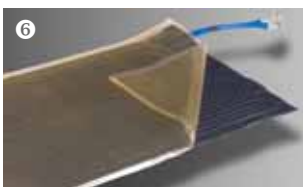

6 Coperture OXIGEL

Cod. 550305 cm 150 x 45 x 0,8

Cod. 550302 cm 95 x 45 x 0,8

Le coperture in gel di poliuretano, rendono più confortevoli i materassini ed aumentano la trasmissione di caldo/freddo al paziente.

